SKLOPIVI ŠTAP ZA SLIJEPE


Oznaka proizvoda: TGR-R LA 853N

Upute za korištenje

1 UVOD

Sklopivi štap za slijepe s gumenom drškom i remenom za zapešće sastoji se od četiri aluminijska dijela koji su povezani dvostrukom i izdržljivom sajlom.

Štapje opremljena je izmjenjivim gumenim vrhom (čepom). Reflektirajuće trake povećavaju razinu sigurnosti i olakšavaju vozačima i drugim sudionicima u prometu identifikaciju slijepih osoba.

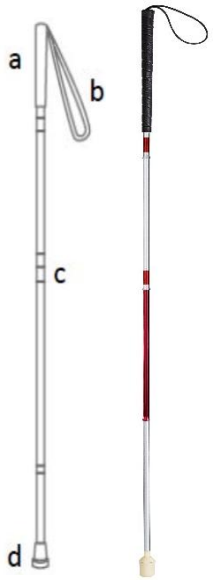

a. rukohvat
b. remen za zapešće
c. reflektirajuća traka
d. gumeni vrh (čep)

2 PRIMJENA

Sklopivi štap za slijepe je namijenjen slijepim i slabovidnim osobama, a omogućuje im da samostalno istraže teren u smjeru hodanja. Upozorava korisnika na nalet prepreka koje se postavljaju na cesti i signalizira svoj invaliditet drugim ljudima.

3 TEHNIČKI PODACI

- Tip: 4 sekcijski
- Boja: srebrna
- Visina: 122 cm
- Sklopljena duljina: 36,5 cm
- Rukohvat: gumeni s ručkom na zapešću
- Dozvoljeno opterećenje: 100 kg
- Težina štapa: 0,2 kg

4 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Očistite štap samo vodom i blagim deterdžentima, temeljito osušite.
- Ne koristite: jake deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivače, benzin ili otapala (to može uzrokovati oštećenje okvira, vidljive nedostatke i posljedično gubitak prava na jamstvo).
- Potrebno je redovito provjeravati kabel (sajlu) na mjestu spoja sekcija. U slučaju abrazije, pucanja ili kidanja, prestanite koristiti štap.
- Preporuča se redovito provjeravati gumeni vrh. Odmah zamijenite istrošeni vrh.

5 UVJETI SKLADIŠTENJA I PRIJEVOZA

Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi

6 NAPOMENE

Timago International Group Ossowski Sp.k., kao i Orto i Medi centar d.o.o., ne snose odgovornost za neprimjereno korištenje Sklopivog štapa za slijepe TGR-R LA 853N, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporaba.

7 OZNAKE

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	Broj LOT-a		Datum proizvodnje
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Bilješka		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Proizvođač

CE MD

TIMAGO.COM

Timago International Group Ossowski Sp.k.

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

Distributer:

ORTO I MEDI centar

Orto i Medi centar d.o.o.

specijalizirana prodavaonica
Grižanska 6
10 040 Zagreb

Tel 01/2911 366
E-mail: info@omc.hr
Webshop: www.omc.hr