
ALUMINIJSKI SKLOPIVI ŠTAP

Oznaka proizvoda: PrimeTim

Upute za korištenje

1 OPIS

Aluminijski sklopivi štap sastoji se od ergonomske ručke, visokokvalitetne aluminijske osovine i protukliznog gumenog vrha (čepa). Zahvaljujući podešavanju visine i mogućnosti preklapanja štapa na tri dijela, vrlo je prikladan za svakodnevnu upotrebu.

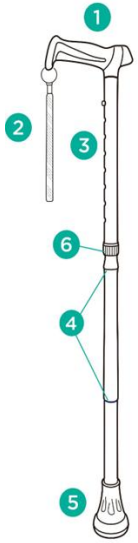

1. ručka
2. remen za zglob
3. podešavanje visine
4. preklopna točka
5. protuklizna guma
6. brava za podešavanje

2 PRIMJENA

Štap je pomoćna oprema koja se koristi za povećanje područja potpore u slučaju pacijenata sa smanjenom pokretljivošću. Preporučuje se i pacijentima kojima je potrebna pomoć i podrška tijekom hodanja, a može se koristiti i kao pomoć u održavanju ravnoteže nakon ozljeda donjih ekstremiteta ili trupa.

Kontraindikacije: poremećaji koordinacije i ravnoteže, uznapredovale reumatske promjene, ozljede i disfunkcije gornjih udova koje mogu ometati korisnika da se osloni na štap.

3 PODEŠAVANJE

- Za podešavanje štapa odvrnite bravu za podešavanje i pritisnite klin za zaključavanje. Odaberite odgovarajuću duljinu i klina za zaključavanje, nakon čega zategnite blokadu podešavanja. Štap je podesiv u koracima od 3 cm.
- Da biste postavili odgovarajuću duljinu štapa, stojte uspravno i savijeni gornji ekstremitet u lakatnom zglobu pod kutom od 20°.
- Štap treba individualno prilagoditi korisniku tako da je rukohvat u razini zgloba kuka.
- Prije upotrebe provjerite je li štap stabilan i da klin za zaključavanje u potpunosti strši kroz otvor za podešavanje štapa.

Napomena! U slučaju nedoumica u vezi s tehnikom kretanja uz upotrebu štapa, obratite se osobi koja ima odgovarajuće znanje ili kvalifikacije.

4 TEHNIČKI PODACI

- Vrsta štapa — sklopivi, aluminijski
- Podešavanje visine — 78-96 cm
- Dozvoljeno opterećenje — 159 kg
- Težina štapa — 0,50 kg
- Boja — ružičasta, plava

5 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Očistite štap samo vodom i blagim deterdžentima, temeljito osušite.
- Nemojte koristiti: jake deterdžente, abrazivna sredstva, izbjeljivače, benzin ili otapala (može doći do oštećenja okvira, vidljivih nedostataka i posljedično gubitka prava na jamstvo).
- Preporuča se redovito provjeravati gumeni vrh. Odmah zamijenite istrošeni vrh.

6 UVJETI SKLADIŠTENJA I PRIJEVOZA

Uređaj ne smije biti izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vodi ili vlazi.

7 NAPOMENE

Timago International Group Ossowski Sp.k., kao i Orto i Medi centar d.o.o., ne snose odgovornost za neprimjereno korištenje Sklopivog aluminijskog štapa PrimeTim, nepoštivanje sigurnosnih propisa i zlouporaba.

8 OZNAKE

REF	Referentni broj		Proizvođač
LOT	Broj LOT-a		Datum proizvodnje
SN	Serijski broj	MD	Medicinski uređaj
	Bilješka		Molimo pročitajte upute
CE	Proizvođač je provjerio usklađenost s osnovnim zahtjevima za medicinske proizvode.		

Proizvođač

TIMAGO.COM

Timago International Group Ossowski Sp.k.

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska
T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com

Distributer:

ORTO I MEDI centar

Orto i Medi centar d.o.o.

specijalizirana prodavaonica
Grižanska 6
10 040 Zagreb

Tel 01/2911 366
E-mail: info@omc.hr
Webshop: www.omc.hr